

WIDEX **MOMENT™**

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

GAMA DE PRODUSE WIDEX MOMENT™

Modelul MRB0
RIC
(Receptor intraauricular)



WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING

APARATUL DUMNEAVOASTRĂ AUDITIV

(Se va completa de către specialistul ORL)

Aceasta este o listă de programe posibile pentru aparatul auditiv. Pentru mai multe informații despre utilizarea acestor programe, consultați secțiunea „Programe” din „Personalizare”.

Seria dumneavoastră de aparate auditive:

PROGRAME	AUDIBILITY EXTENDER
☐ Universal	☐
PureSound	☐
☐ Silențios	☐
☐ Confort	☐
☐ Transport	☐
☐ Urban	☐
☐ Impact	☐
☐ Petrecere	☐
☐ Social	☐
☐ Muzică	☐

PROGRAME SPECIALE**AUDIBILITY EXTENDER**☐ Zen☐☐ Telefon☐**PROGRAME DE COMUTARE INTELI-
GENTĂ****AUDIBILITY EXTENDER**☐ Zen+☐

Denumirile programelor din tabel sunt denumirile predefinite. Dacă ați ales să utilizați alte denumiri disponibile, scrieți noile denumiri în tabel. Astfel, veți ști întotdeauna ce programe sunt disponibile în aparatele dvs. auditive.

Citiți instrucțiunile

Citiți cu atenție această broșură și broșura „Proteze auditive pentru aparate auditive Widex”. înainte de a începe să utilizați aparatul auditiv.

Redare în flux a sunetului și controlul wireless

Acest aparat auditiv permite redarea în flux a sunetului prin intermediul DEX și controlul wireless direct de pe telefon inteligent și alte dispozitive. Pentru asistență și informații suplimentare, contactați specialistul dvs. ORL sau vizitați: <https://global.widex.com/MOMENT>.

Acest aparat auditiv funcționează fără fir cu aplicația TONELINK. Nu ne asumăm răspunderea dacă aparatul auditiv este utilizat împreună cu oricare altă aplicație terță sau dacă aplicația TONELINK este utilizată împreună cu alte dispozitive incompatibile.

CONȚINUT

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA.....	6
APARATUL DUMNEAVOASTRĂ AUDITIV.....	8
Bine ați venit.....	8
Scurtă prezentare a aparatului dumneavoastră auditiv.....	8
CONDIȚII DE UTILIZARE.....	10
Indicații pentru utilizare.....	10
Domeniul de utilizare.....	10
Condiții de funcționare.....	11
Condiții de depozitare și transport.....	11
UTILIZARE ZILNICĂ.....	12
Pornirea și oprirea aparatului auditiv.....	12
Introducerea și îndepărtarea aparatului auditiv.....	12
BATERIA.....	14
Indicatorul gradului scăzut de încărcare al bateriei.....	14
Schimbarea bateriei.....	14
Compartiment pentru baterie rezistent la șocuri.....	16
PERSONALIZARE.....	17
Programe.....	17
Programul Zen (Relaxare).....	19
Schimbarea programelor.....	19

Semnale sonore.....	20
Pierderea aparatului auditiv pereche	20
Reglarea sunetului.....	20
Utilizarea unui dispozitiv smartphone cu aparatul auditiv.....	21
ASOCIEREA APARATULUI AUDITIV CU SMARTPHONE-UL.....	22
CURĂȚARE.....	23
Instrumente.....	23
Modul de curățare a aparatului auditiv.....	23
ACCESORII.....	25
DEPANAREA.....	26
INFORMAȚII DE REGLEMENTARE.....	28
Prevederile FCC și ISED.....	28
Directivele UE.....	30
Directiva 2014/53/UE.....	30
Informații privind eliminarea.....	31
SIMBOLURI.....	32

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți aceste pagini cu atenție înainte de a începe utilizarea aparatului auditiv.



Aparatele auditive și bateriile pot fi periculoase dacă sunt ingerate sau utilizate în mod necorespunzător. Ingerarea sau utilizarea necorespunzătoare poate conduce la leziuni severe sau chiar deces. În caz de ingestie, contactați numărul de urgență sau spitalul imediat.



Nu purtați aparatele auditive atunci când nu le utilizați. În acest mod, se vor asigura ventilarea conductului auditiv și prevenirea infecțiilor auriculare.



Dacă suspectați că aveți o infecție auriculară sau o reacție alergică, contactați medicul sau specialistul ORL.



Contactați specialistul ORL dacă simțiți disconfort la purtarea aparatului auditiv sau dacă nu se potrivește în mod adecvat, provocând iritație, înroșire sau alte efecte similare.



Îndepărtați aparatele auditive înainte de a face duș, de a înota sau de a utiliza un uscător de păr.



Nu purtați aparatele auditive atunci când aplicați parfum, când utilizați produse pulverizate, geluri, loțiuni sau creme.



Nu uscați aparatul auditiv într-un cuptor cu microunde - îl veți distruge în acest mod.



Nu utilizați niciodată aparatele auditive ale altor persoane și nu permiteți altor persoane să folosească aparatul dumneavoastră deoarece vă puteți deteriora auzul.



Nu utilizați niciodată aparate auditive în medii în care pot exista gaze explozive, ca de exemplu, în mine etc.



Nu lăsați aparatele auditive, piesele, accesoriile și bateriile lor la îndemâna copiilor sau persoanelor cu deficiențe mintale.



Nu încercați niciodată să deschideți sau să reparați aparatul auditiv pe cont propriu. Contactați specialistul ORL dacă este nevoie ca aparatul dumneavoastră auditiv să fie reparat.



Aparatele dumneavoastră auditive includ tehnologie de radiocomunicații. Țineți întotdeauna cont de mediul în care le folosiți. Dacă se aplică restricții, trebuie să luați măsuri de precauție pentru a le respecta.



Dispozitivul dumneavoastră a fost conceput astfel încât să respecte standardele internaționale de compatibilitate electromagnetică. Cu toate acestea, nu se poate exclude faptul că poate provoca interferențe cu alte echipamente electrice. Dacă apar interferențe, păstrați distanța față de alte echipamente electrice.



Nu expuneți aparatele auditive la temperaturi extreme sau la un nivel ridicat de umiditate și uscați-le rapid dacă se udă sau dacă transpirați intens.

APARATUL DUMNEAVOASTRĂ AUDITIV

Bine ați venit


Felicitări pentru noul dumneavoastră aparat auditiv.

Utilizați aparatul auditiv în mod regulat, chiar dacă vă va lua puțin timp să vă acomodați cu acesta. Utilizatorii care nu folosesc aparatul frecvent nu beneficiază complet de pe urma unui astfel de aparat.

Aparatul dumneavoastră auditiv și accesoriile sale pot arăta diferit față de imaginile din această broșură. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a efectua orice modificare pe care le considerăm necesare.

Scurtă prezentare a aparatului dumneavoastră auditiv

Imaginea de mai jos prezintă aparatul auditiv fără olivă (piesa anatomică de ureche). Pentru informații suplimentare referitoare la olivă (piesa anatomică de ureche), consultați manualul despre olive. Olivă (piesa anatomică de ureche) este alcătuită dintr-un cablu și un dop pentru ureche și reprezintă acea parte din aparatul auditiv pe care o purtați în interiorul urechii.

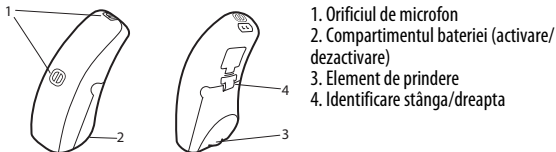

Culoarea de identificare stânga/dreapta vă ajută să identificați corect partea stângă și partea dreaptă. Aparatul auditiv pentru urechea stângă prezintă un marcaj albastru. Aparatul auditiv pentru urechea dreaptă prezintă un marcaj roșu.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Indicații pentru utilizare

Aparatele auditive sunt indicate pentru persoanele cu vârsta mai mare de 36 de luni și cu un interval al hipoacuziei care variază de la un nivel ușor (16 dB HL) la unul sever moderat (până la 85 dB HL) și toate configurațiile de hipoacuzie.

Acestea trebuie programate de specialiști ORL certificați (audiologi, specialiști în aparate auditive, otorinolaringologi) care sunt instruiți în (re)abilitarea auditivă.

Domeniul de utilizare

Aparatele auditive sunt concepute ca niște dispozitive de amplificare a conducției aeriene, care să fie utilizate în situații de ascultare cotidiene. Aparatele auditive pot fi prevăzute cu programul Zen destinat asigurării unui fundal sonor de relaxare (respectiv, sursă de muzică/sunet) pentru persoanele adulte care doresc să asculte astfel de sunete în liniște.

Condiții de funcționare

Aparatul auditiv a fost proiectat să funcționeze în situații cotidiene și funcționează în condiții de mediu care sunt confortabile pentru dvs. Puteți purta aparatul auditiv în timpul zborurilor, dar trebuie să îl scoateți înainte de duș sau înot.

Condițiile specifice de funcționare pentru aparatul auditiv:

	Minimă	Maximă
Temperatură	0°C (32°F)	50°C (122°F)
Umiditate	UR 10%	UR 95%
Presiune atmosferică	750 mbar	1060 mbar

Condiții de depozitare și transport

Aparatul auditiv este sensibil la condiții extreme, cum ar fi temperaturile ridicate. Acesta nu trebuie să fie depozitat sau transportat la lumina directă a soarelui, ci numai în următoarele condiții.


Condiții specifice de depozitare și transport:

	Minimă	Maximă
Temperatură	-20°C (-4°F)	55°C (131°F)
Umiditate	UR 10%	UR 95%

Puteți găsi fișe tehnice și informații suplimentare despre aparatele auditive la <https://global.widex.com>.

UTILIZARE ZILNICĂ

Pornirea și oprirea aparatului auditiv

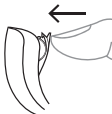

Pentru a porni aparatul auditiv, închideți capacul compartimentului bateriei. Aparatul auditiv va emite un semnal sonor pentru a indica faptul că este activat, doar dacă specialistul dumneavoastră ORL nu a dezactivat această funcție.



Pentru a închide aparatul auditiv, trageți capacul compartimentului pentru baterie în jos.

NOTĂ

Rețineți că trebuie să opriți aparatul auditiv atunci când nu este utilizat.

Introducerea și îndepărtarea aparatului auditiv

Aplicarea aparatului auditiv




1. Inserați oliva (piesa anatomică de ureche) în conductul auditiv în timp ce țineți partea inferioară a tubului/firului pentru ureche. Poate fi util să trageți în același timp de pavilionul urechii spre spate și în sus.

2. Iar apoi așezați aparatul auditiv în spatele urechii. Aparatul auditiv trebuie să fie așezat confortabil pe ureche, aproape de capul dumneavoastră.

Aparatul dumneavoastră auditiv poate fi fixat folosind diferite tipuri de olive. Pentru mai multe informații despre olivă (piesă anatomică de ureche), consultați manualul separat al olivei (piesă anatomică de ureche).

Scoaterea aparatului auditiv

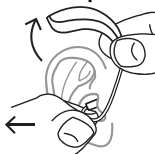

Începeți prin a desprinde aparatul auditiv din spatele urechii.

Apoi extrageți cu grijă oliva din canalul auditiv în timp ce țineți de partea inferioară a tubulaturii/cablului pentru ureche.

BATERIA

Utilizați o baterie **de tip 10 zinc-aer** pentru aparatul dumneavoastră auditiv.

Utilizați întotdeauna o baterie nouă, neutilizată, care este exact tipul de baterie recomandată de specialistul dumneavoastră ORL.

NOTĂ

Asigurați-vă că bateria este complet curată și nu prezintă niciun reziduu înainte de a o introduce în aparatul auditiv. În caz contrar, aparatul auditiv poate să nu funcționeze conform așteptărilor.



Nu încercați niciodată să reîncărcați bateriile aparatelor auditive deoarece acestea pot exploda.



Nu lăsați niciodată în aparatele auditive o baterie plată în timpul depozitării acestora. Poate prezenta scurgeri și deteriora aparatul auditiv.



Eliminați bateriile uzate conform indicațiilor de pe ambalaj și rețineți data expirării.

Indicatorul gradului scăzut de încărcare al bateriei

Atunci când bateria este plată, se va emite un semnal sonor. În cazul în care bateria se descarcă subit, este posibil să nu existe niciun avertisment în acest sens. Vă recomandăm să purtați cu dumneavoastră o baterie de schimb oriunde ați merge.

Schimbarea bateriei

Pentru a schimba bateria, procedați în felul următor:



Desprindeți folia de protecție de pe noua baterie și asigurați-vă că nu există urme de substanță adezivă pe aceasta. Lăsați-o "sa respire" timp de 60 de secunde.



Utilizați elementul de prindere pentru a deschide ușor ușa compartimentului bateriei și pentru a scoate vechea baterie.



Introduceți noua baterie în compartiment conform indicațiilor. Închideți compartimentul. Dacă nu se închide cu ușurință, bateria nu este introdusă corect. În cazul în care nu utilizați aparatul auditiv timp de câteva zile, îndepărtați bateria.

NOTĂ

Preveniți căderea aparatului auditiv - țineți aparatul deasupra unei suprafețe moi atunci când înlocuiți bateria.

Compartiment pentru baterie rezistent la șocuri

Dacă aparatul auditiv va fi utilizat de către un copil sau de către o persoană cu deficiențe intelectuale, puteți ruga specialistul ORL să vi-l pună la dispoziție cu un compartiment pentru baterie rezistent la intervenții neautorizate.



Pentru a deschide compartimentul bateriei, utilizați instrumentul special pe care l-ați primit și procedați la fel ca în imagine.

PERSONALIZARE

Programe

Aceasta este o prezentare generală a programelor disponibile pentru selectare. Pentru recomandări, contactați specialistul ORL.

PROGRAME	UTILIZARE
Universal	Program automat cu accent pe sunet optim în toate situațiile
PureSound	Program automat cu accent pe un sunet natural și plăcut în toate situațiile
Silențios	Program special de ascultare în medii silențioase
Confort	Program special pentru ascultare în medii zgomotoase
Transport	Pentru ascultare în situații cu zgomote ce provin de la autovehicule, trenuri etc.
Impact	Utilizați acest program dacă preferați un sunet clar și precis
Urban	Pentru ascultare în situații în care nivelurile de sunet se schimbă (în supermarketuri, spații de lucru zgomotoase sau similare)
Petrecere	Pentru ascultare în situații în care mai multe persoane vorbesc în același timp

PROGRAME	UTILIZARE
Social	Utilizați acest program în cazul în care participați la mici evenimente de sociale, cum ar fi o cină în familie
Muzică	Pentru a asculta muzica
PROGRAME SPECIALE	UTILIZARE
Zen	Redă tonuri sau sunete pentru un mediu sonor relaxant
Telefon	Acest program este destinat ascultării conversațiilor telefonice
PROGRAME DE COMUTARE INTELIGENTĂ	UTILIZARE
Zen+ (Relaxare+)	Acest program este similar cu programul de relaxare, însă vă permite să ascultați tipuri diferite de tonuri sau zgomote

Denumirile din lista de programe sunt denumiri implicite. Specialistul dumneavoastră ORL poate, de asemenea, să selecteze o denumire de program alternativă dintr-o listă preselectată. Apoi vă va fi și mai ușor să selectați programul potrivit în fiecare situație de ascultare.

În funcție de hipoacuzia dumneavoastră, specialistul ORL poate activa funcția de amplificare a auzului. Întrebați specialistul ORL dacă puteți beneficia de pe urma acesteia.

Dacă nevoile și preferințele dumneavoastră se schimbă în timp, specialistul dumneavoastră ORL vă poate modifica ușor programele selectate.

Programul Zen (Relaxare)

Aparatul dumneavoastră auditiv poate fi prevăzut cu un program unic de ascultare opțional ce poartă denumirea de Zen (Relaxare). Acesta generează tonuri muzicale (și uneori și un zgomot de scurtă durată) pe fundal.



Dacă percepeți o scădere a volumului sau a toleranței sunetelor, dacă nu mai auziți cuvintele la fel de clar sau dacă tinitusul se agravează, contactați specialistul dumneavoastră ORL.



Utilizarea programului Zen (Relaxare) poate interfera cu auzul sunetelor cotidiene, inclusiv al vorbirii. Acesta nu trebuie utilizat atunci când este important să puteți auzi aceste sunete. Comutați aparatul auditiv la un alt program diferit de Zen (Relaxare) în astfel de situații.

Schimbarea programelor

Pentru a schimba programele, apăsați pur și simplu pe tasta dedicată programelor pe telecomandă.

Relaxare+

Pentru a accesa acest program, mențineți apăsată tasta dedicată programelor timp de mai mult de 1 secundă. O acționare scurtă vă permite să treceți prin stilurile de relaxare Zen disponibile. Pentru a părăsi programul, mențineți apăsată tasta programelor timp de mai mult de 1 secundă.

NOTĂ

De asemenea, puteți folosi aplicația pentru a schimba programele și pentru a ajusta sunetul în aparatele auditive.

Semnale sonore

Aparatul dumneavoastră auditiv emite anumite sunete pentru a vă informa că anumite funcții au fost activate sau că ați schimbat programul. Aceste sunete pot fi mesaje vorbite sau semnale sonore.

Rugați specialistul dumneavoastră ORL să dezactiveze aceste sunete dacă nu aveți nevoie de ele.

Pierderea aparatului auditiv pereche

(Disponibil doar în anumite modele)

Specialistul dumneavoastră ORL poate activa o funcție de la nivelul aparatului dumneavoastră auditiv care vă avertizează atunci când pierde contactul cu aparatul auditiv din cealaltă ureche. Veți auzi un mesaj vorbit.

Reglarea sunetului

Aparatul dumneavoastră auditiv reglează automat sunetul în funcție de mediul dumneavoastră acustic.

Dacă aveți o telecomandă, puteți ajusta sunetul și manual pentru mai mult confort sau un nivel sporit de audibilitate, în funcție de nevoile și de preferințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații referitoare la utilizarea telecomenzii, adresați-vă specialistului ORL.

În funcție de setările și funcțiile aparatului auditiv, eventualele ajustări ale sunetului vor afecta ambele aparate auditive.

De fiecare dată când utilizați comanda volumului, veți auzi un semnal sonor, cu excepția cazului în care această funcție a fost dezactivată de către specialistul ORL. Atunci când atingeți setarea maximă sau minimă, veți auzi un semnal sonor constant.

Pentru a opri sonorul aparatului auditiv:

- Mențineți apăsată partea inferioară a tastei pentru volum de pe telecomandă, până când auziți un semnal sonor constant

Pentru a activa din nou sonorul:

- Apăsați partea superioară a tastei pentru volum de pe telecomandă **sau**
- Schimbați programul

Orice reglare a volumului va fi anulată în momentul în care opriți aparatul auditiv sau atunci când schimbați programul.

NOTĂ

De asemenea, puteți folosi aplicația pentru a schimba programele și pentru a ajusta sunetul în aparatele auditive.

Utilizarea unui dispozitiv smartphone cu aparatul auditiv



Când utilizați un smartphone, țineți-l în fața dvs., astfel încât microfonul telefonului să fie aproape de gură. În acest fel, veți beneficia de un sunet optim în timpul apelului telefonic.

ASOCIEREA APARATULUI AUDITIV CU SMARTPHONE-UL

Pentru a asocia aparatele auditive și smartphone-ul trebuie să reporniți aparatul auditiv. Procedați în felul următor:

1. Reporniți aparatele dvs. auditive deschizând și închizând compartimentul pentru baterie.
2. Țineți aparatele auditive aproape de telefon și urmați instrucțiunile de pe telefon.
3. Aparatele auditive și smartphone-ul sunt acum gata de utilizare.


NOTĂ

Aparatele auditive sunt în modul de asociere numai trei minute după ce le reporniți. S-ar putea să fie necesar să le reporniți dacă nu l-ați asociat la timp.

CURĂȚARE

Instrumente

Veți primi următoarele instrumente de curățare împreună cu aparatul auditiv:

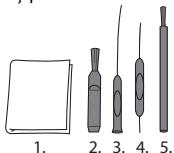

1. Lavetă
2. Perie
3. Instrument lung de eliminare a cerumenului
4. Instrument scurt de eliminare a cerumenului
5. Magnet pentru baterie

Modul de curățare a aparatului auditiv

Curățarea zilnică a aparatului dumneavoastră auditiv îl va face mai eficient și mai confortabil la purtat.



Ștergeți-l cu o lavetă moale (de exemplu, laveta pe care ați primit-o de la specialistul ORL).
În cazul în care deschiderile microfonului sunt blocate, contactați specialistul ORL.

Uscăți rapid aparatul auditiv dacă se udă sau dacă transpirați intens. Unele persoane utilizează un dezumidicator special precum Widex PerfectDry Lux pentru a-și menține aparatele auditive uscate și curate. Întrebați specialistul ORL dacă acesta este potrivit pentru dumneavoastră.

Când nu este în uz, lăsați deschis compartimentul bateriei pentru a asigura ventilația aparatului auditiv. Pentru informații referitoare la modul de curățare a olivei, consultați manualul aferent.



Nu utilizați niciun tip de lichid sau dezinfectant pentru a vă curăța aparatul auditiv.



Curățați și inspectați aparatul auditiv în fiecare zi după utilizare pentru a verifica dacă nu este deteriorat. Dacă aparatul auditiv se sparge în timp ce îl purtați, lăsând fragmente mici în conductul auditiv, adresați-vă medicului dumneavoastră. Nu încercați niciodată să scoateți singuri fragmentele.

ACCESORII

Puteți utiliza o varietate de accesorii împreună cu aparatul dumneavoastră auditiv. Pentru a vedea dacă puteți beneficia de pe urma utilizării acestor accesorii, adresați-vă specialistului ORL.

Nume	Utilizare
RC-DEX	Telecomandă
TV-DEX	pentru ascultarea programelor TV și audio
PHONE-DEX 2*	pentru facilitarea utilizării telefoanelor fixe
FM+DEX	pentru redarea în flux a semnalelor audio și FM
COM-DEX	pentru conectarea wireless la telefoane mobile și alte dispozitive prin Bluetooth
COM-DEX Remote Mic	pentru a ajuta utilizatorii aparatelor auditive să audă cuvinte în situații dificile de ascultare

*Disponibil numai în anumite țări.

DEPANAREA

Aceste pagini conțin recomandări referitoare la cum trebuie să procedați dacă aparatul dumneavoastră auditiv nu mai funcționează sau dacă nu funcționează conform așteptărilor. Dacă problema persistă, contactați specialistul dumneavoastră ORL.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul auditiv nu emite sunete	Nu este pornit	Compartimentul bateriei trebuie să fie închis complet
	Bateria nu funcționează	Introduceți o baterie nouă
Volumul aparatului auditiv este prea scăzut	Urechea este blocată de cerumen	Adresați-vă medicului
	Este posibil ca auzul dumneavoastră să fi suferit modificări	Contactați specialistul ORL/medicul
Aparatul auditiv generează încontinuu un sunet ascuțit	Urechea este blocată de cerumen	Adresați-vă medicului
Cele două aparate auditive ale dumneavoastră nu sunt sincronizate	S-a pierdut conexiunea dintre aparatele auditive	Oprii și porniți din nou aparatele auditive

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatele auditive nu reacționează la dispozitivul de comandă cu o modificare corespunzătoare a volumului sau programului	a. Dispozitivul este utilizat dincolo de raza de transmisie b. Interferențe electromagnetice puternice în apropiere c. Dispozitivul și aparatele auditive nu sunt asociate	a. Deplasați dispozitivul mai aproape de aparatele auditive. b. Îndepărtați-vă de surse cunoscute de interferențe EM c. Verificați cu specialistul ORL pentru a vă asigura că dispozitivul este asociat aparatelor auditive
Percepeți limbajul „cu întrepreri” (activat și dezactivat) de la aparatele auditive sau nu auziți deloc cuvinte (sunet dezactivat) de la aparatul auditiv opus.	a. Bateria dintr-unul dintre aparatele auditive s-a descărcat b. Interferențe electromagnetice puternice în apropiere	a. Înlocuiți bateria la unul sau ambele aparate auditive. b. Îndepărtați-vă de surse cunoscute de interferență

NOTĂ

Aceste informații se referă numai la aparatul auditiv. Consultați „Proteze auditive pentru aparate auditive Widex”. pentru informații specifice pentru oliva dvs. Dacă problemele persistă, contactați specialistul ORL pentru asistență.

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Prevederile FCC și ISCED

FCC ID: TTY-UPA

IC: 5676B-UPA

Declarația Comisiei Federale de Comunicații

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user's authority to operate the equipment.

Declarația ISED / Déclaration d'ISED

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED EXPOSITION AUX RADIATIONS:

Cet équipement est conforme avec ISED les limites d'exposition aux rayonnements définies pour un contrôle environnement. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

Directivele UE

Directiva 2014/53/UE

Prin prezentul document, Widex A/S declară că MRB0 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte dispoziții relevante din Directiva 2014/53/UE. MRB0 conține un emițător radio care funcționează la 10,6 MHz, -54 dBμA/m @10 m.

O copie a Declarației de conformitate cu Directiva 2014/53/UE este disponibilă la:

<https://global.widex.com/doc>



N26346

Pentru a evita o eventuală deteriorare a transmisiei radio, dispozitivul dvs. trebuie să se afle la o distanță de cel puțin 25 cm (10 inci) de alte echipamente de comunicații radio.

Informații privind eliminarea

Nu eliminați aparatele auditive, accesoriile și bateriile acestora împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Aparatele auditive, accesoriile și bateriile acestora trebuie să fie eliminate în locuri special amenajate pentru deșeuri electrice și electronice sau înmânate specialistului ORL, pentru eliminare în condiții de siguranță.

SIMBOLURI

Simboluri utilizate de obicei de Widex A/S la etichetarea dispozitivelor medicale (etichete/instrucțiuni de utilizare/etc.)

Simbol	Titlu/Descriere
--------	-----------------



Producător

Produsul este realizat de către producătorul ale cărui nume și adresă sunt specificate lângă simbol. Dacă este cazul, poate fi specificată și data fabricației.



Număr de catalog

Numărul de catalog (articol) al produsului.



Consultați instrucțiunile de utilizare

Instrucțiunile de utilizare conțin informații importante de siguranță (avertismente/măsuri de precauție), iar acestea trebuie citite înainte de utilizarea produsului.



Avertisment

Textul marcat cu un simbol de avertisment trebuie citit înainte de utilizarea produsului.



Marcajul WEEE

„Nu se elimină ca deșeuri menajere”. Atunci când trebuie eliminat un produs, trebuie să fie trimis la un centru de colectare desemnat în acest sens pentru reciclare și recuperare pentru a preveni riscul de efecte nocive asupra mediului sau sănătății umane ca urmare a prezenței substanțelor periculoase.

Simbol	Titlu/Descriere
	Marcajul CE Produsul corespunde cerințelor prevăzute de directivele europene privind marcul CE.
	Marcajul RCM Produsul corespunde cerințelor de reglementare privind siguranța electrică, compatibilitatea electromagnetică (EMC) și spectrul de frecvențe radio pentru produsele furnizate pe piețele din Australia sau Noua Zeelandă.



0123

WIDEX A/S

Nymoellevvej 6, DK-3540 Lynge, Danemarca
<https://global.widex.com>

Nr. manual:

9 514 0547 033 02

Ediție:

2020-06

