

## WIDEX CHARGE n CLEAN



## CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Compact și portabil; deconectați USB-ul, închideți capacul și puneți-l în buzunar sau geantă.
- Poate fi alimentat de la mai multe surse de alimentare.
- Utilizare intuitivă, susținută de indicatoare luminoase care afișează nivelul de încărcare al aparatului auditiv.
- Design inteligent protejat, cu capac cu balamale ușor de utilizat.

## DESCRIERE

Încărcătorul WIDEX CHARGE n CLEAN este conceput pentru a încărca și întreține două aparate auditive WIDEX MRR2D.

Încărcătorul are un compartiment de încărcare pentru fiecare aparat auditiv, un compartiment de întreținere (uscare și UV-C) pentru receptoare, două indicatoare luminoase (pe laterale) care indică starea de încărcare a fiecărui aparat auditiv și un indicator luminos central care indică starea ciclului de întreținere. Fiecare aparat auditiv poate fi încărcat individual, în funcție de starea de încărcare a aparatului auditiv. Acest lucru înseamnă că, dacă un aparat auditiv este complet încărcat și plasat în încărcător, acesta nu se va încărca. Cu toate acestea, dacă celălalt aparat auditiv nu este încărcat, acesta se va încărca. În timpul încărcării aparatelor auditive, se efectuează întreținerea (UV-C și uscare). Ciclul de întreținere durează 30 de minute.

## PROPRIETĂȚI

Culoare:	Negru
Dimensiuni:	Înălțime: 50 mm Lățime: 83 mm Adâncime: 40 mm
Greutate:	aproximativ 100 g
Capacitate:	Poate conține un set de aparate auditive. Poate încărca aparatele auditive individual. Pentru timpul de încărcare și indicații, consultați Instrucțiunile de utilizare pentru încărcătorul WIDEX CHARGE n CLEAN.
Lumină UV:	Dezinfectarea și uscarea cu raze UV se efectuează în timpul încărcării. Ciclul de întreținere durează 30 de minute.
Intervale de temperatură, umiditate și presiune atmosferică de funcționare:	0 °C (32 °F) până la 35 °C (95 °F), 20 %-75 % rH
Depozitare și transport:	-20 °C (-4 °F) până la 60 °C (140 °F), 5% - 90% rH

## ALIMENTARE

Intrare	Tip: DC, stabilizat 5V +/- 5% Conector: priză micro USB Curent minim: 900 mA Se pot utiliza diferite surse de alimentare (cel puțin compatibile cu USB 2.0). Baterie externă: Capacitate: 10 000mA/h - Conector: USB - Tensiune: 5V Aparatul auditiv se poate încălzi în timpul încărcării.
---------	---


## ELIMINARE

- Nu aruncați dispozitivul (nou sau uzat) împreună cu deșeurile menajere obișnuite.
- Dispozitivul trebuie eliminat ca deșeu electronic sau chimic, în conformitate cu reglementările locale.

## Încărcătorul pe scurt

Dispozitivul este format dintr-o unitate de încărcare pentru fiecare aparat auditiv, un compartiment de întreținere pentru receptoare și trei indicatoare luminoase care arată starea de încărcare a aparatelor auditive și starea ciclului de întreținere. Capacele se închid cu ajutorul unui magnet.

- 1.Port micro USB
- 2.Aparatul auditiv stâng se încarcă bine
- 3.Aparatul auditiv drept se încarcă bine
- 4.Compartimentul de întreținere a receptoarelor
- 5.Indicator luminos de încărcare pentru aparatul auditiv stâng
- 6.Indicator luminos de încărcare pentru aparatul auditiv drept
- 7.Indicator luminos de întreținere

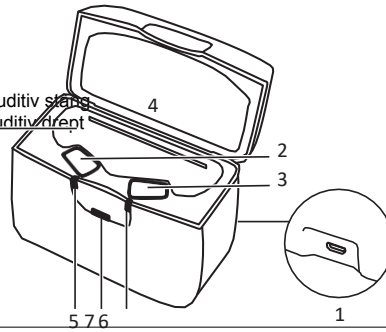

## ÎN CUTIE

În cutia de prezentare veți găsi:

- Un încărcător
- Un cablu USB
- O sursă de alimentare
- Un manual de instrucțiuni